



Poznámka:
Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny.
Pokud v návodu objevíte jakékoli chyby, informujte nás o nich.

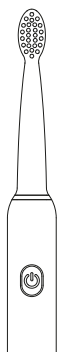

GIOsonic
giraffe/ crocodile/ panda/
Coco the capybara
Sonický zubní kartáček pro děti


NÁVOD K POUŽITÍ

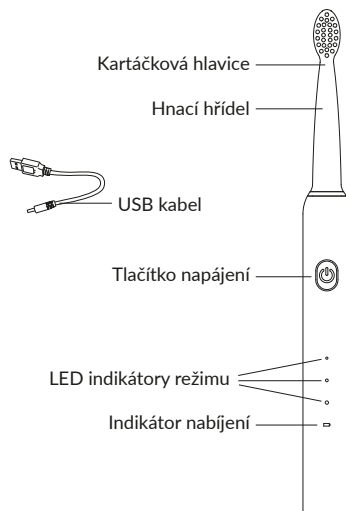


Pokyny k nabíjení

1. Zkontrolujte nabíječku a elektrickou zásuvku – ujistěte se, že jsou bezpečné, odpovídají platným normám a jsou vhodné pro používané síťové napětí.
2. Ujistěte se, že je USB kabel suchý a že na konektoru nabíječky nejsou stopy vody, poškození ani jiné závady. Nabíječku připojujte pouze za bezpečných podmínek.
3. Před prvním použitím elektrický zubní kartáček zapněte. Pokud je baterie vybitá nebo má nízkou úroveň nabití, před prvním použitím ji plně nabijte.


Postup

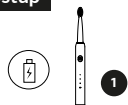


Pokud je baterie téměř vybitá a LED indikátor nabíjení bliká, před použitím zubní kartáček nabijte. Informace o nabíjení naleznete v části „Pokyny k nabíjení“.

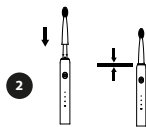


Nasadte kartáčkovou hlavici podle obrázku. Mezera mezi kartáčkovou hlavicí a rukojetí je běžná.

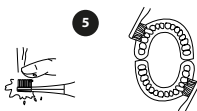


Pohybuje kartáčkovou hlavici nahoru a dolů. Netlačte na ni příliš silně ani zuby nedrhnete.

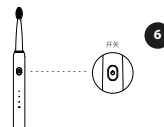

Abyste zabránili rozstříkávání zubní pasty, vypněte zubní kartáček ještě předtím, než jej vyjmete z úst.

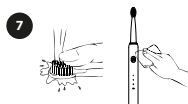

Po dokončení čištění opláchněte kartáčkovou

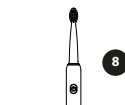

Kartáčkovou hlavici uchovávejte na suchém a dobře větraném místě.

Popis indikátoru stavu baterie

Stav indikátoru při nenabíjení	Popis
Indikátor	Pohotovostní režim
Červený indikátor svítí	Nízký stav baterie, je nutné zařízení nabít.
Indikátor nesvítí	Baterie je vybitá, zařízení nelze používat.

Technické údaje a informace

Název výrobku: InnoGIO GIOsonic Giraffe/Crocodile/Panda/Coco the Capybara – sonický zubní kartáček pro děti
Model: GIO-460GIRAFFE / GIO-460CROCODILE / GIO-460PANDA / GIO-460-CAPYBARA
Stupeň krytí: IPX7
Jmenovité napětí / výkon: DC 3,7 V / 0,5 W
Doba nabíjení: přibližně 3 hodiny
Obsah balení: tělo zubního kartáčku s kartáčkovou hlavicí, USB kabel, návod k použití.

Doporučení pro ústní hygienu

Čistěte si zuby alespoň dvakrát denně.

Kartáčkovou hlavici vyměňujte každé 2–3 měsíce.

Nízká úroveň (období mléčných zubů)

Vytvářejte u dítěte návyk pravidelného čištění zubů, jemně čistěte ústní dutinu a používejte kartáčkovou hlavici s měkkými štětinami.

Střední úroveň (období prořezávání zubů)

Podporujte zdravý růst nových zubů, pečujte o citlivé dásně a dbejte na každodenní čištění zubů.

Vysoká úroveň (období stálých zubů)

Udržujte správné návyky při čištění zubů a důkladně je čistěte, abyste snížili riziko vzniku zubního kazu.

Stav indikátoru při nabíjení	Popis
Červené světlo svítí	Režim nabíjení
Zelené světlo svítí	Nabíjení dokončeno

LIKVIDACE NEPOTŘEBNÉHO ZAŘÍZENÍ DOMÁČÍMI UŽIVATELI V EVROPSKÉ UNII



Přítomnost tohoto symbolu na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem. Jste odpovědní za jeho správnou likvidaci a jste povinni jej odevzdat na autorizovaném sběrném místě určeném pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Třídění, správná likvidace a recyklace vysloužilých elektrických zařízení pomáhají chránit přírodní zdroje a zajišťují jejich zpracování způsobem šetrným k životnímu prostředí i lidskému zdraví. Další informace o sběrných místech pro použitá elektrická a elektronická zařízení získáte u místního úřadu nebo společnosti zajišťující nakládání s komunálním odpadem.



innoGIO

www.innogio.com

INNIO GLOBAL sp. z o.o.
Ostródzka 74H, 03-289 Varšava, Polsko
Vyrobeno v Číně

f @innoGIO.official @innogio_com



Navlhčete kartáčkovou hlavici a naneste na štětiny přiměřené množství zubní pasty.



Vložte kartáčkovou hlavici do úst a přiložte štětiny pod úhlem 45° k linii dásní. Stiskněte tlačítko a zvolte požadovaný režim čištění.